

**dati tecnici
e codici**

tricumed



port porthales® 4000
con filtro antibatterico per la profilassi antimeningite
ed arresto ago in ULTEM®

Volume della camera del port:	0,45 ml
Diametro setto:	11 mm
Altezza :	12 mm
Dimensioni base:	30 x 26,7 mm
Codice:	250 V 000 004 oWA

IP2000V
per la somministrazione continua intratecale di farmaci

Volume:		10 ml	20 ml	35 ml	40 ml	60 ml
Porthate ml/24h:	0,5 ml	200 V 050 010 oWA	200 V 050 020 oWA	200 V 050 035 oWA	200 V 050 040 oWA	
	0,8 ml		200 V 080 020 oWA	200 V 080 035 oWA	200 V 080 040 oWA	200 V 080 060 oWA
	1,0 ml		200 V 100 020 oWA	200 V 100 035 oWA	200 V 100 040 oWA	200 V 100 060 oWA
	1,5 ml		200 V 150 020 oWA	200 V 150 035 oWA	200 V 150 040 oWA	200 V 150 060 oWA
	2,0 ml			200 V 200 035 oWA	200 V 200 040 oWA	200 V 200 060 oWA
	3,0 ml				200 V 300 040 oWA	200 V 300 060 oWA
Altezza totale:		11 mm	14 mm	19 mm	21 mm	27 mm
Peso:		~100 g				
Diameter:		78 mm				
Setti:	Durata:	500 punzioni con il set di riempimento omolotato				
	Diametro:	Riempimento: 8 mm Bolo: 6 mm				
Application in:		Terapia antalgica, terapia antispastica				

for special sizes please contact **tricumed**

localizzatore
per localizzare il setto di riempimento della IP2000V

Altezza:	22 mm
Dimensioni:	132 x 41 mm
Codice:	200 V 000 001 oWo

set catetere spinale 4000
cateteri in silicone radioopaco con set di introduzione

Segmento catetere:	proximal	distal
Lunghezza:	600 mm	1000 mm
Diametro esterno:	1,5 mm	2,4 mm
Diametro interno:	0,7 mm	0,6 mm
Codice:	277 V 000 001 oWA	

Importatore esclusivo per l'Italia:

X-Med snc
Via Pastorino 36/84
16162 Genova
mob: 349 330 78 21 / 393 956 62 05
tel-fax: 010 407 06 13
xmedsnc@libero.it

Altre info da tricumed.
Please contact the manufacturer for more detailed information.


tricumed si riserva il diritto di effettuare delle variazioni
changes reserved / all rights reserved

03/09

**una nuova qualità di vita
per pazienti con
dolori e/o spastici**

una soluzione unica per le
medicazioni intratecali croniche

tricumed
tricumed Medizintechnik GmbH
Röntgenstraße 7a
24143 Kiel / Germania Federale
tel: +49 - (0) 4 31 - 70 990 - 0
fax: +49 - (0) 4 31 - 70 990 - 99
www.tricumed.de
info@tricumed.de

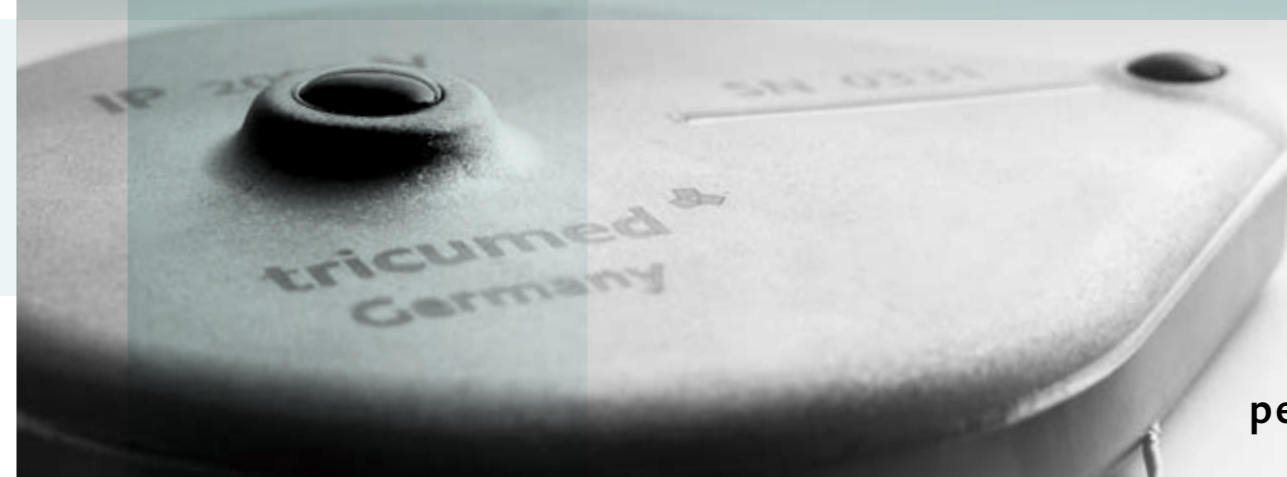


pensare avanti.

una nuova qualità di vita per pazienti con dolori e/o spastici

tutti i componenti da un unico produttore

tricumed 

Tramite una somministrazione continua e minima di farmaco di circa un centesimo della dose orale gli effetti collaterali si riducono drasticamente.

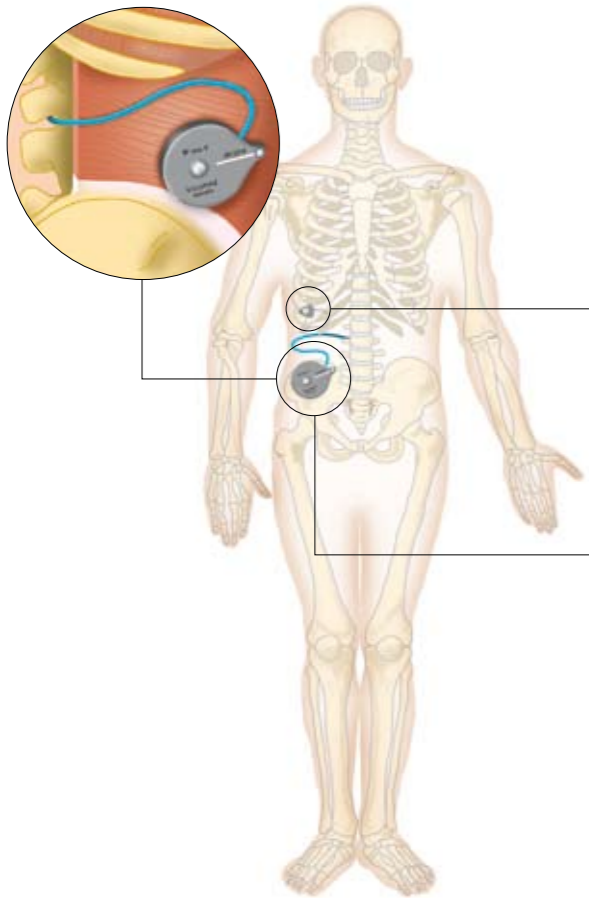

port porthales® 4000

un'infusione sicura con un filtro antibatterico integrato come profilassi antimeningite



titration

Per testare il farmaco si impianta il set **catetere spinale 4000**. Prima però al posto della pompa infusoria, si impianta il **porthales 4000** sul arco costale – con un abbondante ricciolo di catetere.

pompa infusoriale IP2000V

per una provata medicazione cronica tramite una pompa infusoriale impiantabile moderna e indipendente dal valore del pH del farmaco



set catetere spinale 4000

catetere distale e prossimale con set di introduzione


posizione catetere

Il catetere distale e prossimale vengono accorciati in base al paziente e collegati in modo sicuro e continuo con un connettore in titanio. Una ancoretta in silicone ne blocca la posizione.

connettore in titanio




catetere spinale

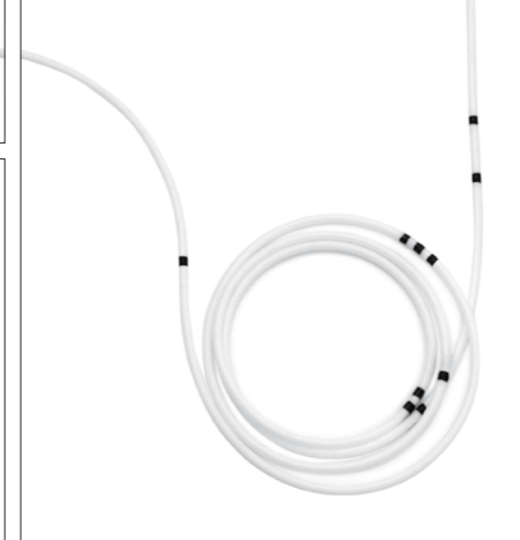

ancoretta in silicone



catetere a punta chiusa

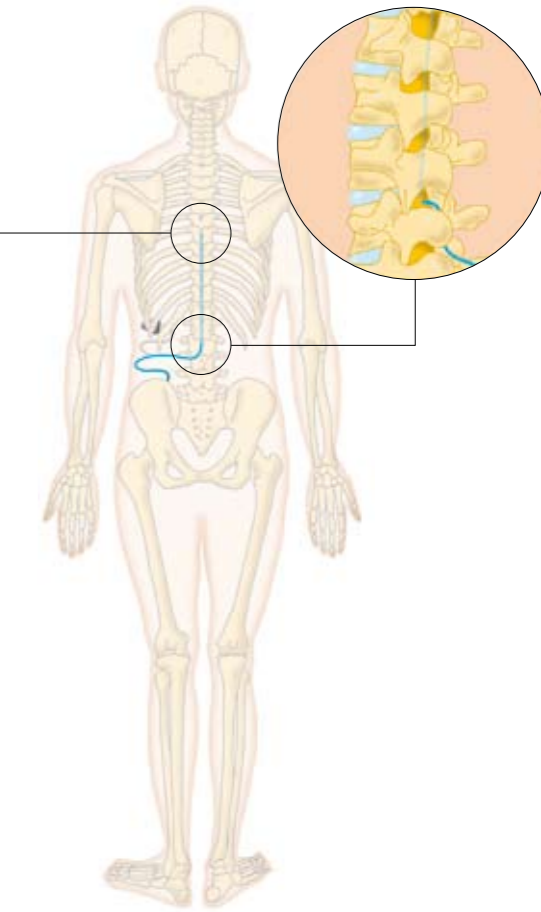

localizzatore

per un semplice e sicuro riempimento della IP2000V



riempimento percutaneo della IP2000V

Con il localizzatore elettronico il setto di riempimento della IP2000V è facilmente reperibile. A seconda del volume del serbatoio e della portata la pompa si riempie ogni 1-3 mesi. Con il localizzatore elettronico il setto di riempimento della IP2000V.

terapia analgica e/o antispasitica a lungo termine

La IP2000V può essere riempita almeno 500 volte con il set di riempimento omologato dal produttore. Il sistema propulsivo dura ben più di 25 anni senza perdite di energia. La IP2000V è compatibile con la risonanza magnetica a 3 Tesla